

סטנדרט חדש ב- RF מיקרונידלינג

מערכת פוטנזה מעלה את עולם המיקרונידלינג לשלב חדש. הוורסטיליות של המערכת מאפשרת להתאים את הטיפול במדויק בהתבסס על צרכי המטופל המשתנים.

ניתן לטפל בכל סוגי העור, בכל מקום בגוף ובכל עונות השנה.



CYNOSURE

Potenza™
RF Microneedling

GALAXY
aesthetic signature

למידע נוסף בקרו באתר
www.cynosure.com/potenza

מפרט טכני ואביזרים

| | |
|-----------|--|
| סוג RF | בי-פולאר, מונופולאר |
| עוצמה | מקסימום 50 וואט |
| תדר | 1 מגה הרץ, 2 מגה הרץ |
| קצב חזרות | 0.5-0.3 פולסים בשניה |
| ידיית | ממונעת, AC |
| טיפים | Motorized Handpiece 100-7043-051: S-16 100-7043-052: S-25 100-7043-053: S-49 100-7043-054: I-16 100-7043-055: I-25 100-7043-056: I-49 AC Handpiece 100-7043-060: P1-08 100-7043-061: A1-12 100-7043-062: A1-15 |
| עובי מחט | 0/25 |
| רוחב פולס | 5-500mm |
| כניסת מתח | 100-240 וולט 50/60 Hz500VA |
| ממדים | 50.34 x 36.536.11 x cm |
| משקל | 9.5 ק"ג |
| עגלה | 32.26 x 48.2 X 99.26 cm 47.8 ק"ג |


©2020 Cynosure, LLC. כל הזכויות שמורות. Cynosure הוא סימן מסחרי רשום של Cynosure, LLC. טייגר טיפ הוא סימן מסחרי של Cynosure, LLC. Cynosure, LLC הוא סימן מסחרי של Jeisys Medical, Inc. בעל זכויות בלעדיות לצילום. שמוש בצילום ללא אישור בכתב של Cynosure אסור. מכשיר המיקרו-נידלינג בתדר רדיו פוטנזה מיועד לקרישיות חשמלית והמוסטזיס של רקמות רכות עבור מצבים דרמטולוגיים. תופעות לוואי אפשריות כוללות אדמומיות זמנית, עקצוץ זמני ותחושת צריבה בזמן קבלת טיפול. כמו כל ההליכים הרפואיים, לא כל המטופלים מתאימים לטיפול. באחריות מטפלת/ת מוסמכת להעריך התאמתו של כל נבדק לעבור טיפול ולהודיע למטופלים על סיכונים כלשהם המעורבים בטיפול, הנחיות לפני ואחרי, וכל מידע רלוונטי אחר. תוצאות הטיפול עשויות להשתנות בין מטופלים והם אינם מובטחים.

מספק תוצאות, מניע רווחיות.

מיצוק העור | שיפור פגמים | חידוש העור

פנים

לפני ואחרי 3 טיפולים

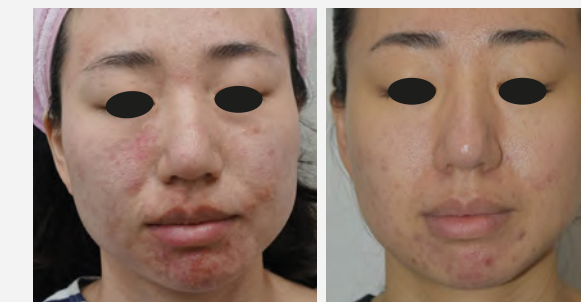


צוואר

לפני ואחרי טיפול אחד



בטן


לפני ואחרי 2 טיפולים

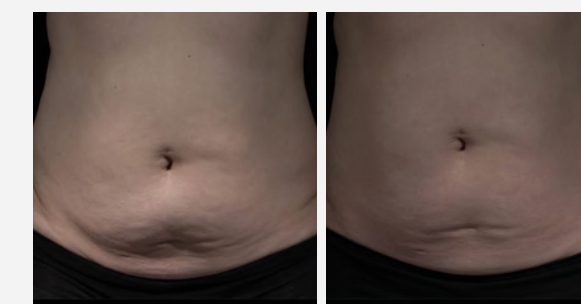

הפתרון הנכון עבור כל מטופל

בחרו את הטיפ המתאים למטופל שלכם

עושה שימוש בתא אוויר כפול שעוצב במיוחד כדי ליצור שחרור אוויר כלפי העור כדי להעמיק את החדירה לעור של חומרים קוסמטיים.

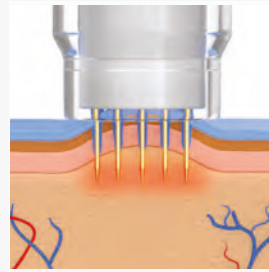


Fusion

- מערך 21 אלקטרודות מבודדות
- עומק משתנה 0.5-2.5 mm




עושה שימוש בתא אוויר כפול שעוצב במיוחד כדי ליצור שחרור אוויר כלפי העור כדי להעמיק את החדירה לעור של חומרים קוסמטיים.

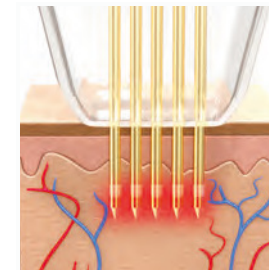


Tiger

- מערך 16, 25, 49 אלקטרודות מבודדות-למחצה
- עומק משתנה 0.5-4.0 mm

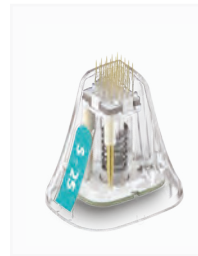

עושה שימוש בתא אוויר כפול שעוצב במיוחד כדי ליצור שחרור אוויר כלפי העור כדי להעמיק את החדירה לעור של חומרים קוסמטיים.

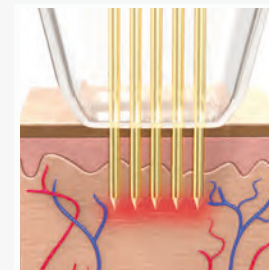


אלקטרודות מבודדות

- מערך 16, 25, 49 אלקטרודות
- עומק משתנה 0.5-4.0 mm



לטיפול מדייק ושיפור פגמים הנמצאים בעומק העור.

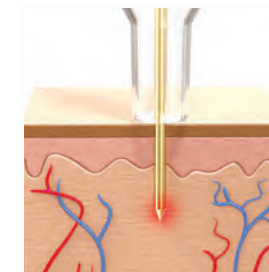

אלקטרודה מבודדת

- עומק משתנה 0.8, 1.2, 1.5 mm



מכשיר מיקרונידלינג
ארבעה מצבי RF
ראשון מסוגו בעולם

טפלו במגוון רחב של מצבים רפואיים בצורה שטחית ועמוקה

הטוב ביותר בכל תרחיש

מונופולאר

מעביר אנרגיה על אזור רחב ברקמה לטובת חימום עמוק המאפשר מיצוק והידוק העור.

ביפולאר

מעביר אנרגיה באופן ממוקד יותר ובאזור שטחי יותר ברקמה. אידיאלי עבור התחדשות העור.

פוטנזה הוא מכשיר מתקדם ביותר בתחום המיקרונידלינג RF זה מאפשר לי להתאים ולייעל את הטיפולים עבור המטופלים שלי שדורשים את הטיפולים היעילים ביותר בטכנולוגיות מתקדמות.

ד"ר רוברט וויס